


CASOS PRÁCTICOS 2013 04

TALLADIUM INTERNATIONAL IMPLANTOLOGY

Av. Blondel, 54 3º · 25002 · Lleida · Spain · Telf. +34 973 289 580 · info@talladiumes.com · www.talladiumes.com

SOLUCION A LA ESTÉTICA

Disilicato de Litio sobrecolado sobre Pilar Dinámico. Es posible?

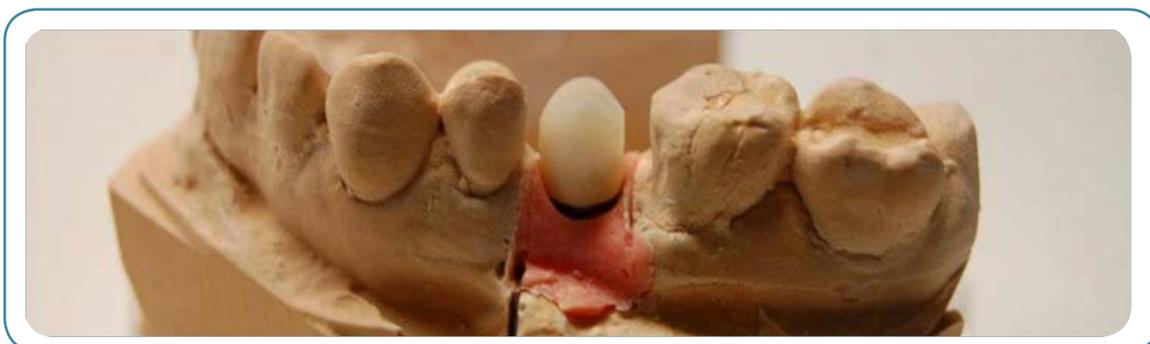


AUTOR: Xavier Piñol, BOXDENTAL



FECHA: Mayo, 2013



Disilicato de Litio, Pilar Dinámico®, Tilite

Corona sobre implantes en 15. Sobrecolado de disilicato de litio sobre base Pilar Dinámico mecanizada en Tilite. Modelo con reducción Estratificación con e-max

Preparación de la base de Tilite para opacar. Desmontado del Pilar Dinámico, chorreamos la base y oxidamos con el programa específico para el Tilite

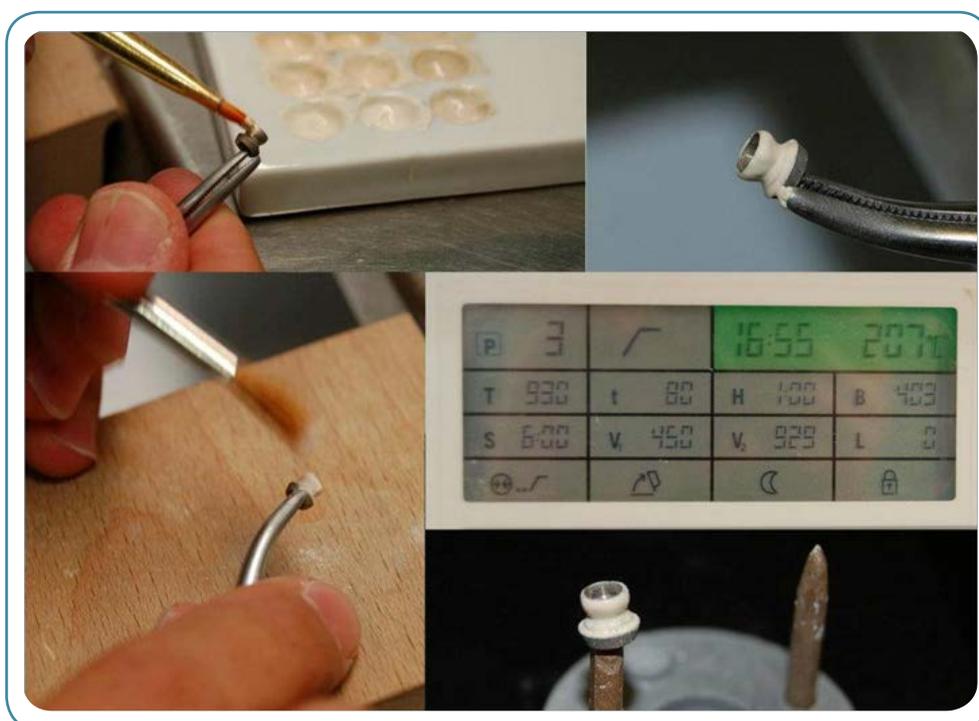

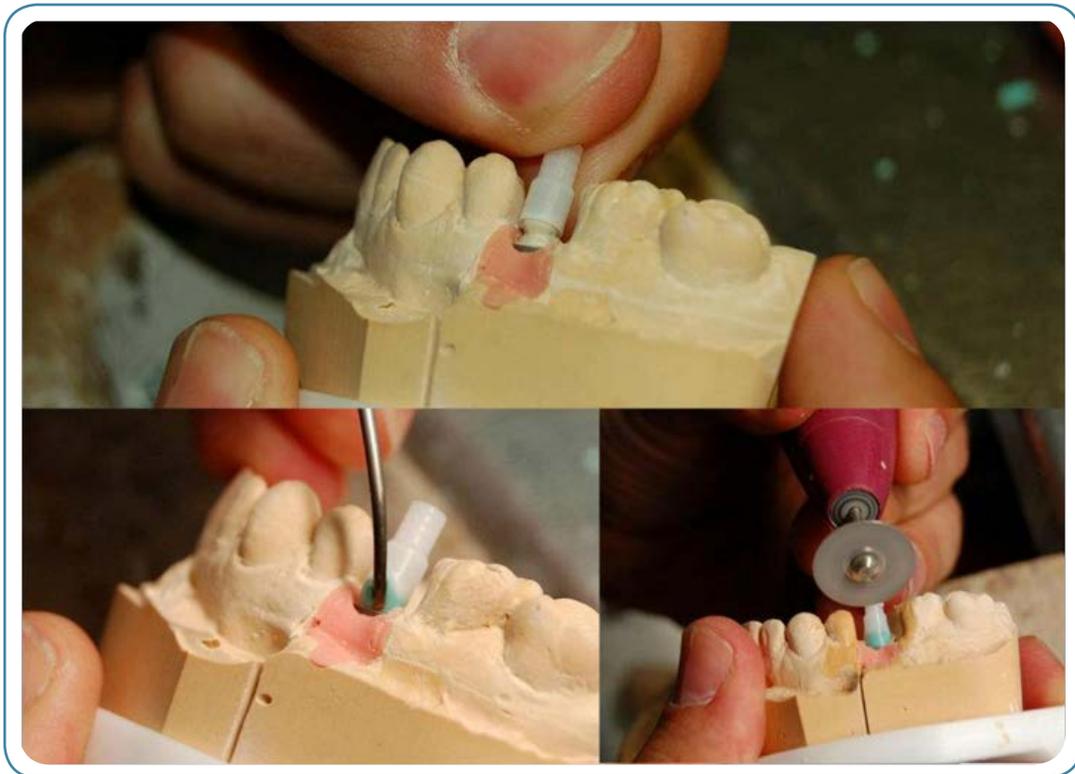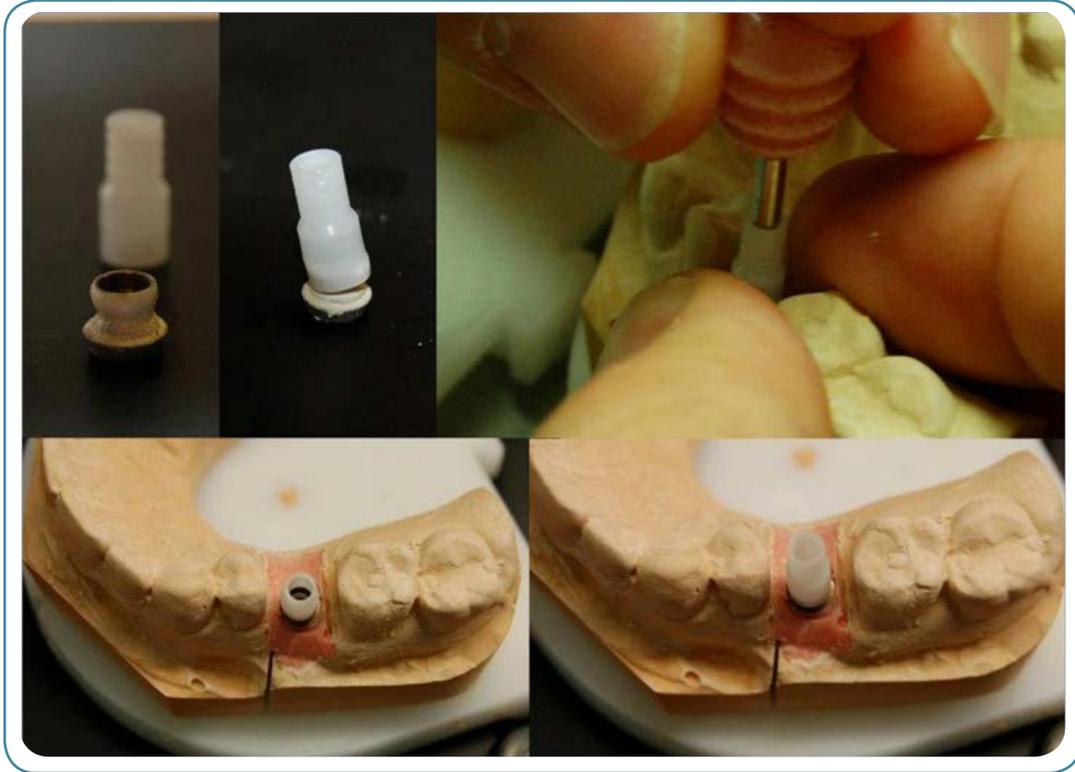

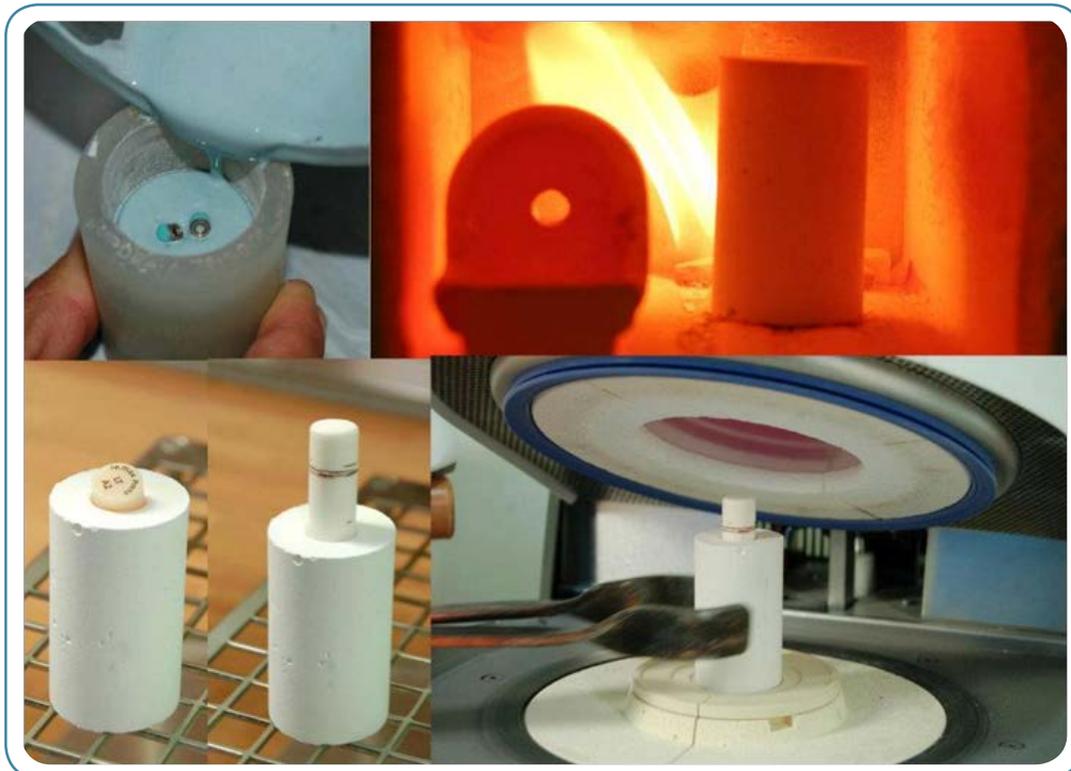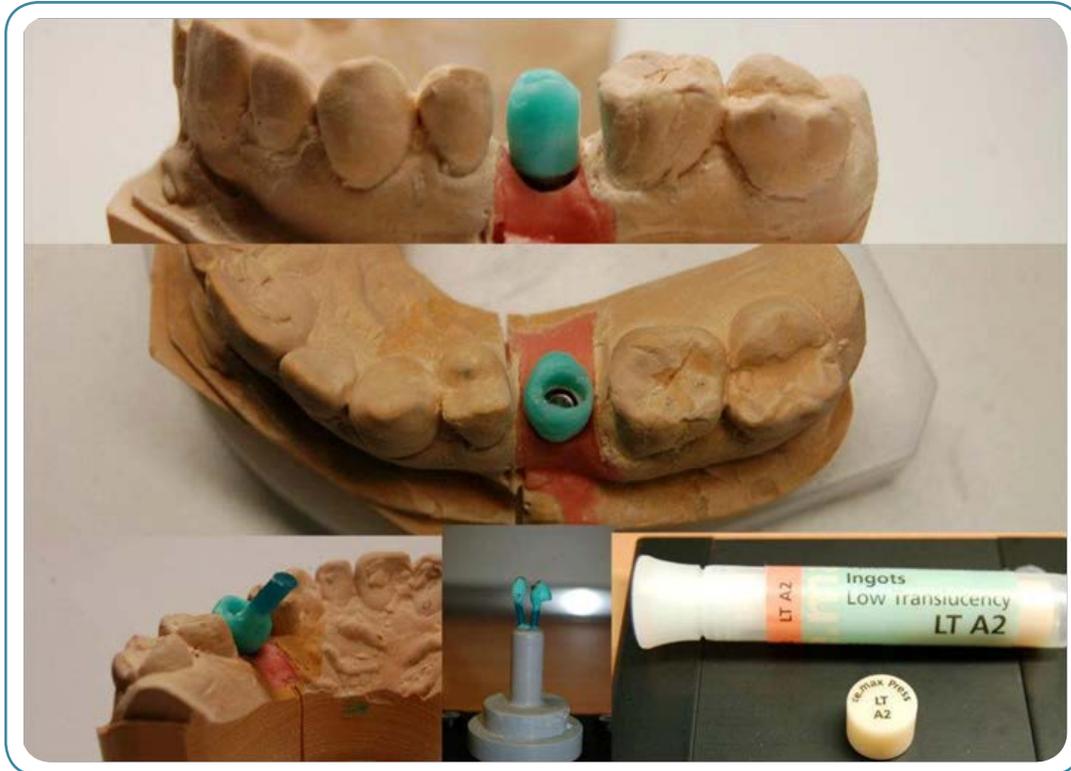



El Pilar dinámico nos ha dado la posibilidad de modificar la posición de la entrada del tornillo.
El disilicato de litio + e-max nos da la estética.