


Ø 12


# DYNAMIC PRE-MILL3D®

NÚMERO PATENTE  
Dynamic Premilled  
ES 2590002

**DYNAMIC  
PREMILL3D**  
DYNAMIC ABUTMENT® SOLUTIONS

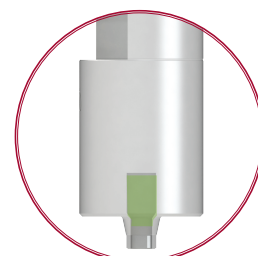


**Canal angulado pre-fresado**  
El Dynamic Premill3d® ya dispone de un fresado previo del canal angulado

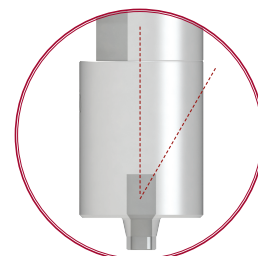

**Elección de la angulación de 0 a 30°**  
Permite escoger la angulación de la entrada del canal angulado para la introducción del tornillo de fijación al implante



**Fresado del canal angulado**  
Diseño CAD y fresado del canal angulado en CAM hecho por el cliente

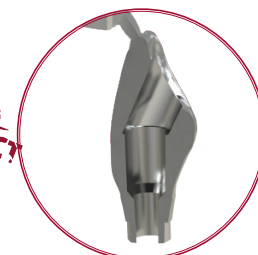


**Estructura final del Dynamic Pre-milled**

**Disponible en Cromo-Cobalto**  
Para aplicar cerámica directamente

Optimizado para una mejor estrategia de fresado




Mecanizado de precisión de +/- 5 micras

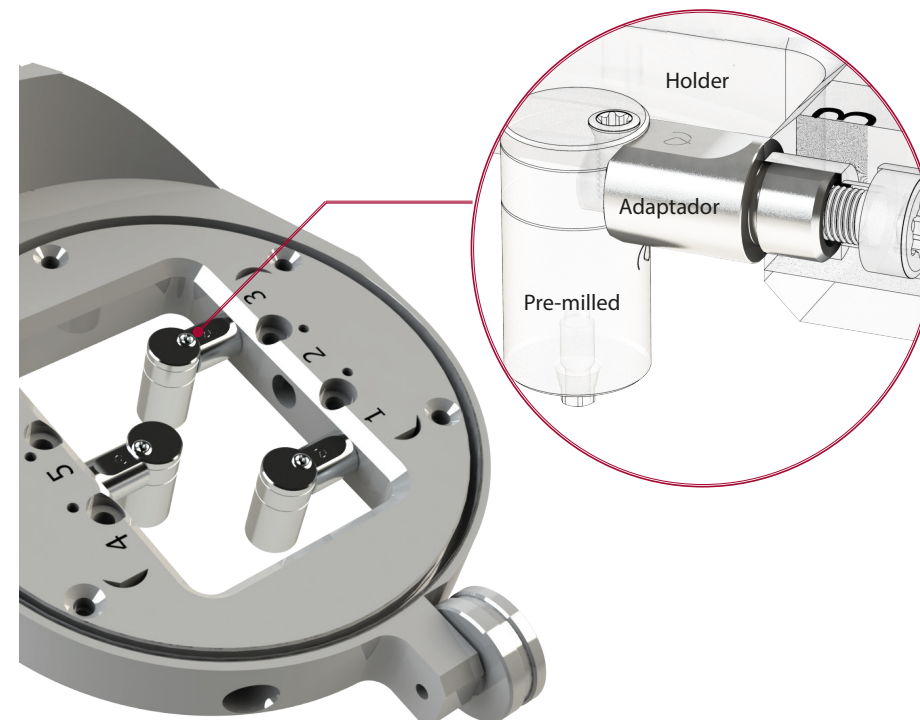

## ADAPTADORES



**No es necesario adquirir un nuevo holder**  
El adaptador contiene la conexión del holder y conecta el holder con el premilled

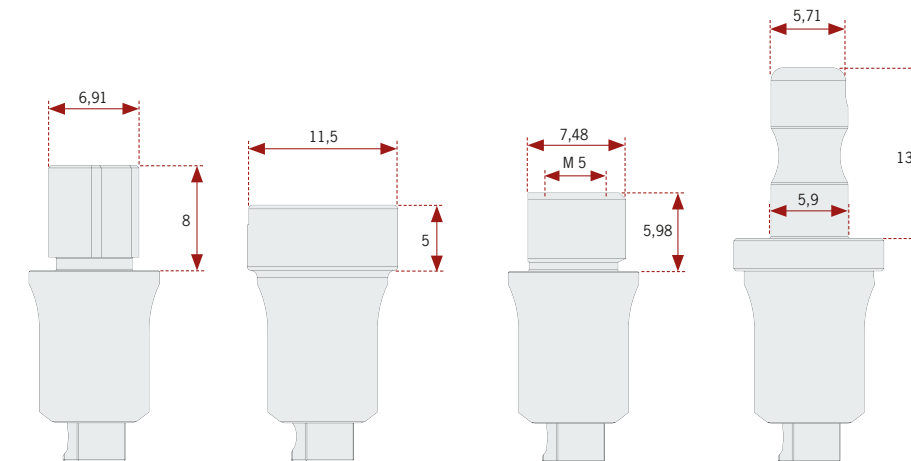

## ADAPTORES a medida

Diseñamos y fabricamos adaptadores para cada tipo de holder  
(spain@dynamicabutment.com)