

INTERFASE DINÁMICA® *


Las Interfase Dinámica® 3.0 de Dynamic Abutment® Solutions es una aportación tecnológica al tratamiento digital para la elaboración de sistemas angulados mediante CAD-CAM: el sistema dinámico incluye la Interfase Dinámica®, el conjunto tornillo-destornillador Dinámico, scanbodies y librerías disponibles para los principales softwares CAD del mercado: Exocad, 3Shape, Dentalwings y Dental Cad.

NÚMERO PATENTE
Interfase Dinámica®
ES 2 584 167

NÚMERO PATENTE
Dynamic TiBase®
US 10.130.447

CORRIGE LA
ANGULACIÓN

hasta
45°

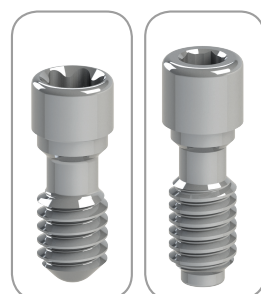


Tornillo
dinámico

Tornillo
recto

*Máxima angulación disponible para la primera altura gingival de la Interfase Dinámica®.
Máxima angulación para el resto de las alturas gingivales en desarrollo.

Las bases de Titanio de grado V tienen un **anonizado dorado** para mejorar la estética de trabajo

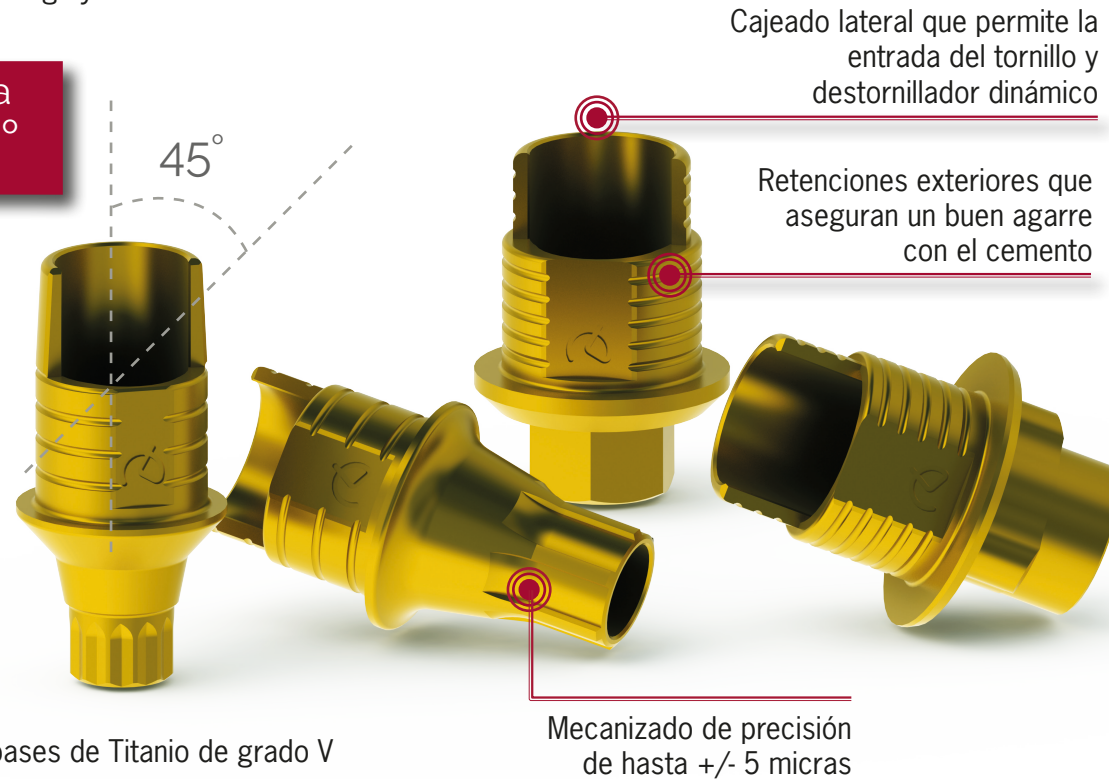


INTERFASE DINÁMICA 3TiBASE®

La Interfase Dinámica 3TiBase® ofrece la posibilidad de trabajar con diferentes alturas de cementado: 5, 7 o 9mm. Está diseñada especialmente para aquellos casos que requieren mayor altura. De esta forma se consigue más superficie de apoyo de la estructura, aportando más resistencia y evitando roturas por una descompensación de altura entre la interfase y la estructura.




El Dynamic μScanbody puede utilizarse para esaneo intraoral o extraoral.

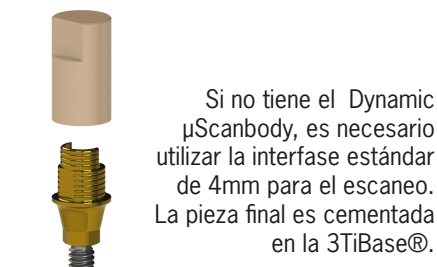

Si no tiene el Dynamic μScanbody, es necesario utilizar la interfase estándar de 4mm para el escaneo. La pieza final es cementada en la 3TiBase®.

INTERFASE DINÁMICA®

Opciones gingivales

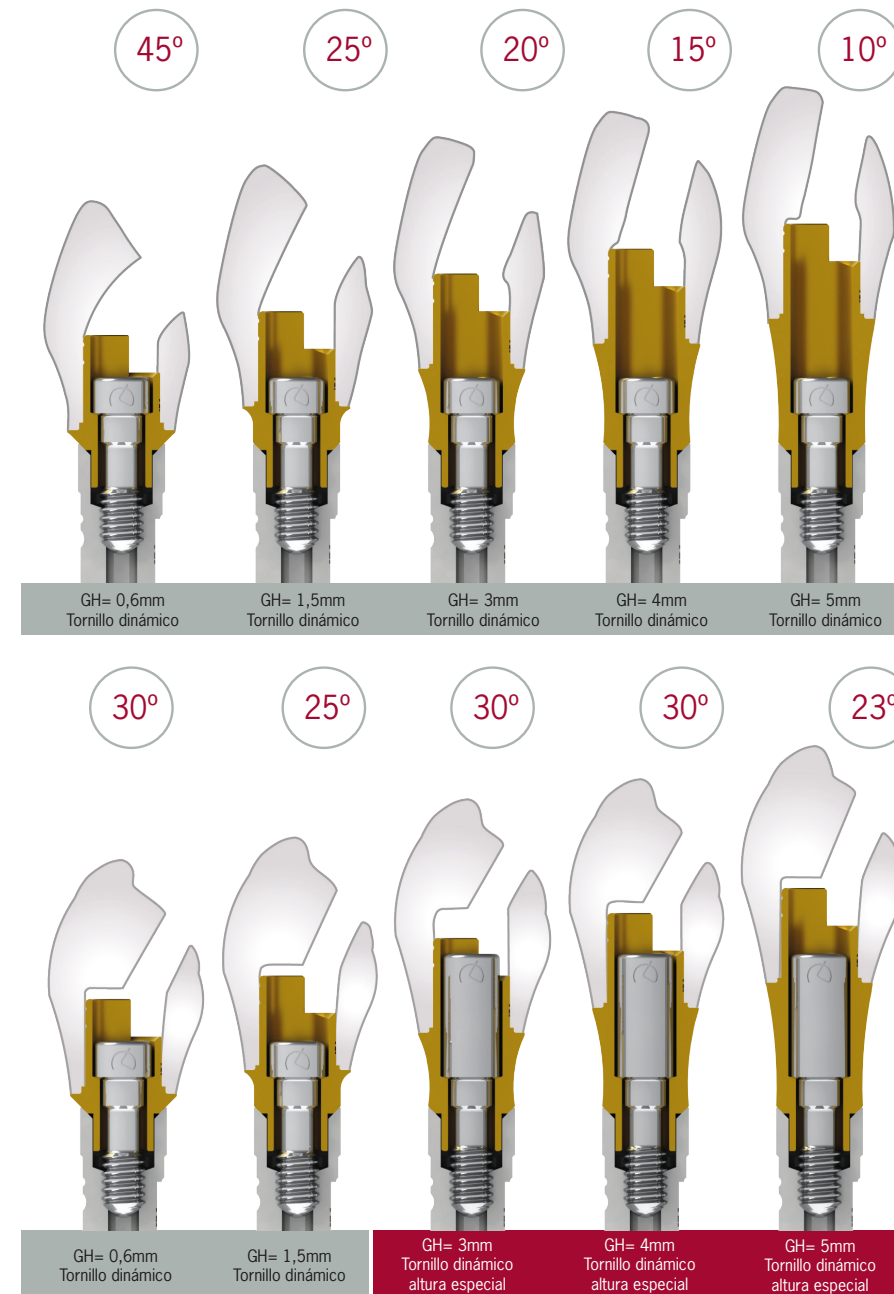

*Ejemplo con Interfase Dinámica® compatible con Zimmer Screw-Vent Ø3,5 (Código 0040)



- Mantiene la angulación
- Ø canal angulado más estético
- Reducción del 32% del canal angulado
- Incrementa el volumen de la estructura
- Tornillo cautivo

(Colocar el tornillo en la Interfase antes de cementar)